


Инструкция по применению Целлюлесс МД  
Красота и укрепление тела

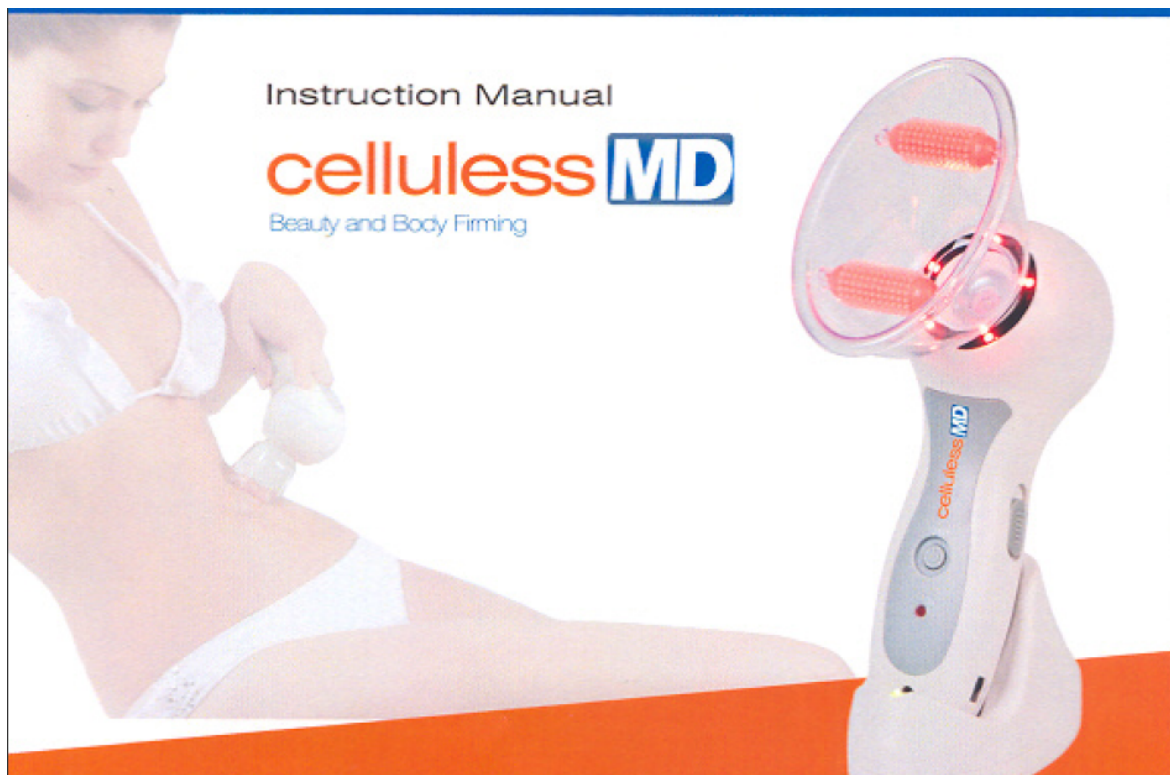

## О Целлюлесс МД

Целлюлесс МД предлагает женщинам различных культур именно то, что они хотят: естественный высокоэффективный косметический уход, не только нежный, но и качественный. Этот аппарат все-в-одном может быть использован на теле для приведения кожи в тонус и устранения признаков старения. Валковые головки Целлюлесс МД стимулируют кожу, восстанавливают естественное функционирование тела.

Целлюлесс МД очень прост в использовании; при строгом соблюдении инструкций по применению Ваш Целлюлесс МД вскоре станет частью регулярного ухода за Вашей новой кожей. Используйте Целлюлесс МД в течение нескольких минут для достижения мгновенных блестящих результатов.

Массаж зон тела в течение 5-10 минут в день – это наиболее экономичный и эффективный способ для восстановления тонуса и гладкости.

### Характеристики:

- Портативный, легкий в использовании.
- Идеально подходит для рук, живота, спины, бедер, ягодиц и ног.
- Сменные чашки с роликами.
- Регулируемая вакуумная система для глубокого массажа.
- Укрепление мышц и снятие напряжения.

### Преимущества:

- Заметное разглаживание кожи.
- Снижение веса, разглаживание и придание формы тела.
- Блестящий, ровный цвет и состояние кожи.
- Отсутствие побочных эффектов, какие присутствуют после операции и инъекций.
- Помощь в улучшении и укреплении дряблой кожи.

### Компоненты Целлюлесс МД:

1 эргономичный прибор Целлюлесс МД (А)

1 эргономичная чашка Дуал роллер (В)

1 эргономичная чашка Сингл роллер (С)

1 АС/DC адаптер 110В / 220В (ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании) (D)

1 база Организатор/Зарядное устройство Целлюлесс МД (Е)

1 руководство по эксплуатации на английском и испанском языках

1 элитная программа питания Целлюлесс МД



Предлагаемые зоны применения:



Способ применения:

А) Многофункциональный массажер Целлюлесс МД разработан для использования ТОЛЬКО с цитрусовым маслом с шариковым аппликатором, которое должно быть нанесено на кожу перед каждым применением, затем использовать эксклюзивный антицеллюлитный крем Целлюлесс для достижения лучших результатов и разглаживания кожи. Использование Целлюлесс МД без данного масла может повлечь дискомфорт. Также Вы можете объединять эксклюзивные кремы и лосьоны для тела с Целлюлесс МД.

Б) Подсоедините вилку (1) к электрической розетке в стене. Убедитесь, что электрическое напряжение, обозначенное на адаптере (2), соответствует напряжению сети в розетке, от которой Вы собираетесь использовать продукт.

В) Проверьте на какой позиции ВКЛ/ВЫКЛ стоит переключатель (3) продукта, расположенного сбоку. Если ВКЛ, (появится красный индикатор (4) НА приборе) перед использованием обязательно заряжайте прибор минимум в течение 8 часов, или используйте его подсоединенным к розетке (1). (Если продукт подключен к основанию (5) индикатор на основе загорится зеленым цветом (6), а на приборе – красным (4).)

Г) После зарядки прибора выберите насадку массажера для применения на желаемой части тела.

(7) Для маленьких зон тела, таких как руки, живот, спина или голени)

(8) Используйте данную насадку массажера для ног, живота, бедер и ягодиц)

Д) Чтобы заменить насадку массажера открутите ВКЛ/ВЫКЛ желаемой насадки.

Е) Для более глубокого массажа увеличьте или снизьте скорость всасывания (10). В зависимости от того, на какой скорости Вы почувствуете комфорт кожи.

Ж) В процессе массажа кожи, если чашка прибора не скользит по коже, нажмите кнопку ускорения массажа (11).

З) Для достижения лучших результатов совмещайте массажер Целлюлесс МД с нашей эксклюзивной серией продуктов по уходу за кожей: антицеллюлитный крем для снижения риска возникновения целлюлита. Гель, снижающий содержание жира, для укрепления и приведения тела в тонус, эксклюзивный увлажняющий лосьон для укрепления тела, а для разглаживающего массажа используйте Цитрусовое масло с шариковым аппликатором.

И) Отключайте от источника питания.



## Меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием массажера, если Вы болеете, проходите лечение или беременны.

Этот прибор не является медицинским, и предназначен только для массажа.

- Медицинские свойства предполагаются или гарантируются при использовании данного продукта.

Убедитесь в том, что прибор выключен перед отключением его от сети.

Рекомендуется начинать массаж с низкой скорости/интенсивности на начальной стадии, затем постепенно увеличивать скорость/интенсивность по необходимости.

Не массируйте отдельную зону более 10 минут.

Не оставляйте продукт в местах, доступных для детей.

Не используйте прибор в зоне варикозного расширения вен, родинок или на участках с поврежденной кожей.

Не используйте в зоне заметных недавних шрамов.

Избегайте области вокруг пуповины. Если Ваш живот твердый и горячий не используйте прибор и проконсультируйтесь со своим терапевтом.

Вы можете заметить покраснение кожи в зоне обработки – это нормальное явление, и оно временно.

Если Ваш Целлюлесс МД неисправен, не пытайтесь открыть его или отремонтировать. Ремонт может быть произведен только производителем или уполномоченным дистрибьютором.

**ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ИЛИ КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ.** Также как и с любым массажным прибором, людям с индивидуальными заболеваниями необходимо проконсультироваться с терапевтами перед использованием прибора.

## Эксплуатация и хранение:

Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его.

Используйте и заряжайте прибор только при помощи прилагаемого адаптера.

Избегайте контакта Целлюлесс МД с водой.

Необходимо чистить чашки и прибор после каждого применения.

## Целлюлесс МД: политика возврата

Данный продукт имеет гарантию производителя. Мы принимаем возврат только неоткрытого и неиспользованного Целлюлесс МД в течение 30 дней после покупки. В случае повреждения герметичной упаковки Целлюлесс МД не может быть возвращен. Картонная упаковка должна быть в исходном состоянии, не искаженной.

## ВНИМАНИЕ:

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта. Внимательно прочтите инструкцию. Используйте продукт лишь в целях, описанных в инструкции. Данный продукт не предназначен для замены профессиональной медицинской рекомендации, диагноза или лечения. Используйте данный продукт на Ваш собственный риск. Производитель и дистрибьютор не несут никакой ответственности

за использование данного продукта. Тщательное наблюдение необходимо при использовании продукта рядом с детьми или лицами с ограниченными возможностями. Не используйте данный продукт при ощущении боли или если Вы беременны. Не массируйте части тела, на которых есть вздутия, раздражения или кожная сыпь.

Все гарантии, как выраженные, так и подразумеваемые, или коммерческая пригодность, или пригодность для конкретных целей не признаются, производитель или дистрибьютор не несут ответственность за любые нарушения, возникающие в результате использования данного продукта, включая, но, не ограничиваясь прямыми, косвенными, случайными, дисциплинарными и последовательными нарушениями. Максимальная ответственность производителя или дистрибьютора перед Вами, и Ваше эксклюзивное право по использованию данного продукта – это сумма, уплаченная Вами производителю или дистрибьютору.

## Технология массажа

Для каждой зоны массажа: обязательно ознакомьтесь с Целлюлесс МД, не забывайте всегда массировать по направлению к сердцу, после каждого массажного движения вверх (нажимайте кнопку интенсивности) и приступайте к следующему движению.

Вам необходимо настроить и ознакомиться с уровнем скорости всасывания, и настроить подходящую для Вас скорость.

Если Вы хотите обработать несколько частей тела, всегда начинайте с верхней части желаемой зоны обработки, и следуйте сверху вниз. Используйте прибор, соблюдая правильное направление, и в соответствии с обозначенным временем ежедневно до получения желаемого результата. После этого Вы можете использовать прибор каждую неделю для поддержания стройности в дюймах.


Не применять прибор непосредственно в зоне варикозного расширения вен, или минимум в течение 2 месяцев после операции на вены. Наслаждайтесь лечением настолько часто, насколько это необходимо. Для поддержания желаемого результата в ногах используйте прибор минимум один раз в месяц.



Спина: время массажа 5-8 минут

Бедра: время массажа 5-8 минут

Ягодицы: время массажа 5-8 минут

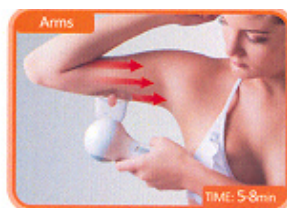

Руки: время массажа 5-8 минут

Живот: время массажа 5-8 минут

Ноги: время массажа 5-8 минут

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Наименование Товара:** ЦЕЛЛЮЛЕС МД

**Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:**

*14 (Четырнадцать) дней.* В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.

**Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества:**

*14 (Четырнадцать) дней.* В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.

*90 (Девяносто) дней.* В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой же Товар надлежащего качества без перерасчета цены.

**Продавец:** Общество с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ОГРН 1037739431784).

**Адрес, по которому осуществляется замена Товара\*:** Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, дом 55, Торговый Центр Останкино, зал В, павильон 2.

**Режим работы отдела Продавца по возврату товара:** по рабочим дням с 11.00 до 16.00.

**Контактный телефон Продавца:** (495) 737-82-32.

\*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ осуществляется по почте.

**Дата продажи Товара:** определяется моментом оплаты и передачи Товара.

**Номер посылки либо счета\*\*:** \_\_\_\_\_

**Подпись представителя Продавца:** \_\_\_\_\_

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Адрес/Тел. Покупателя:** \_\_\_\_\_

**Покупатель с условиями гарантийного обязательства ознакомлен и согласен**

**Подпись Покупателя:** \_\_\_\_\_

**Незаполненный полностью настоящий гарантийный талон недействителен.**

\*\*Номер посылки или счета находится в сопутствующих документах.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Условия гарантийного обязательства:**

- 1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, приобретенный только непосредственно у организации, указанной в настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец);
- 2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;
- 3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне;
- 4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;
- 5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара;
- 6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному в настоящем талоне;
- 7) доставка Товара для замены и получение нового Товара осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет;
- 8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
- 9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу заполненный полностью настоящий гарантийный талон;
- 10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца;
- 11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
- 12) перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец вправе провести проверку качества Товара;

- 13) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в день предъявления Товара при условии согласования с ним дня замены Товара и наличия соответствующего Товара на складе;
- 14) возврат денег осуществляется, как правило, в день возврата Товара при условии согласования с Продавцом дня возврата Товара;
- 15) при отказе Продавца от замены Товара или возврата денег на условиях настоящего гарантийного обязательства потребитель обязан получить у Продавца отметку об отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие на настоящем талоне такой отметки (с указанием должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении Продавцом добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;
- 16) гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части Товара считаются равными гарантийному сроку на Товар;
- 17) для некоторых товаров правила и условия возврата указываются отдельным документом, передаваемым вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные обязательства действуют в части, не противоречащей такому документу.

В замене отказано по причине \_\_\_\_\_

Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

М.П.